



UNA SOLUCIÓN EFECTIVA PARA ELIMINAR TROMBOS

El catéter de aspiración Sniffer™ es un catéter de intercambio rápido que presenta una lumen grande y una impulsabilidad y maniobrabilidad superiores y está diseñado para eliminar trombos de manera eficaz y rápida en la coronaria.

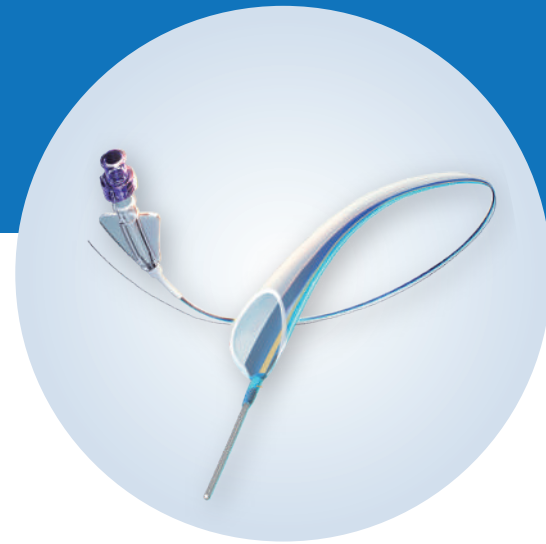


Impulsabilidad y resistencia a la torsión óptimas

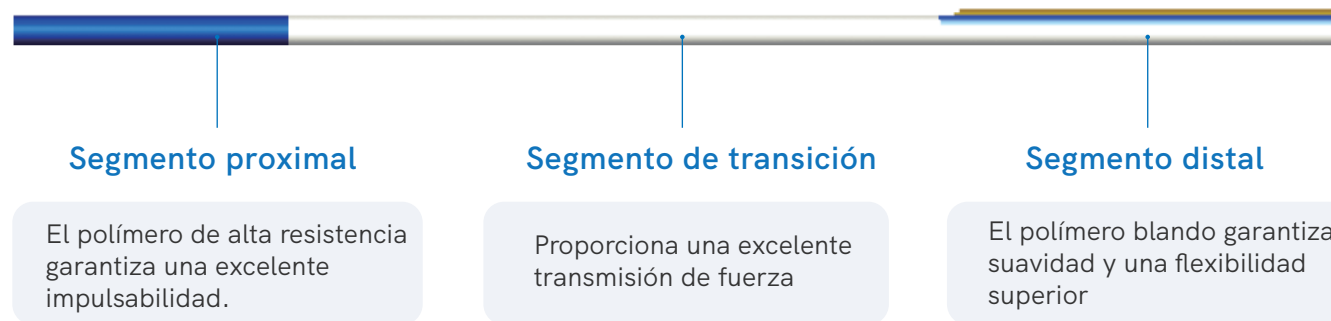



Lumen de aspiración circular grande para mejorar la eficiencia

- La capacidad mejorada de eliminación de trombos garantiza una succión rápida y estable

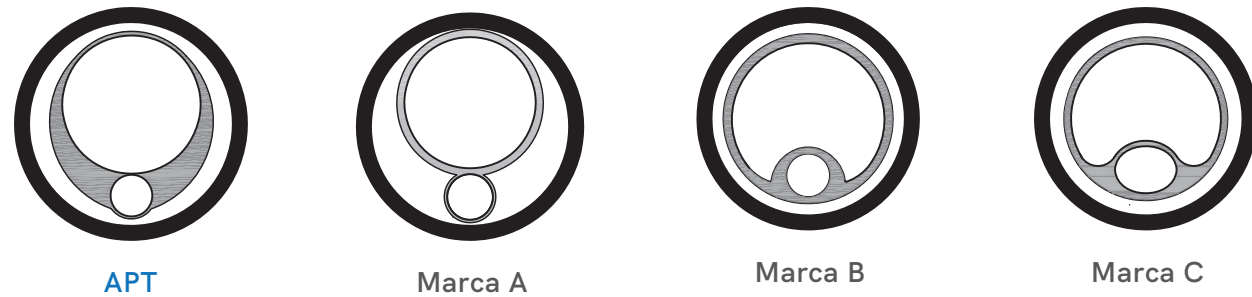

Estilete precargado extraíble

- La rigidez mejorada del eje proporciona una resistencia a la torsión, maniobrabilidad e impulsabilidad excelentes.

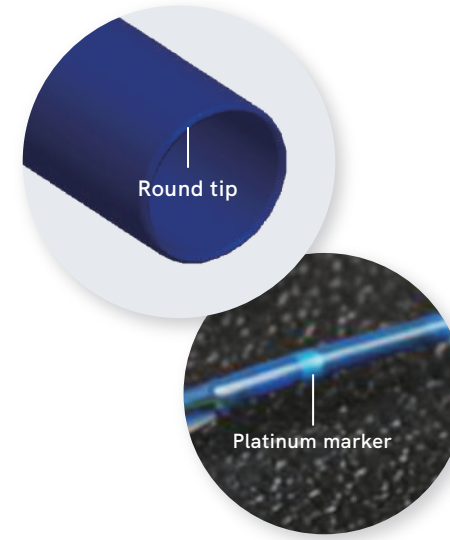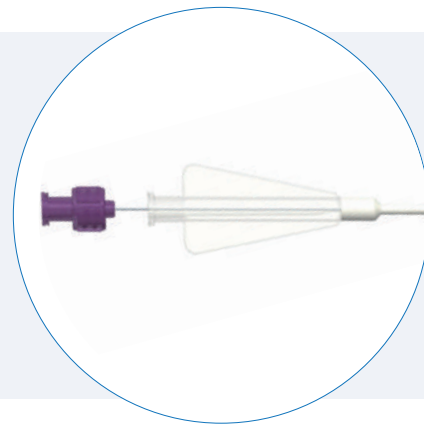


Diseño de punta optimizado

- Diseño de punta redonda atraumática para minimizar los posibles daños en los recipientes
- Punta corta de 6 mm para aumentar la atravesabilidad del catéter sobre una anatomía tortuosa
- El marcador de platino proporciona una visibilidad fluoroscópica confiable

Revestimiento

- Revestimiento hidrofílico lubricado distal de 30 cm para un desplazamiento suave

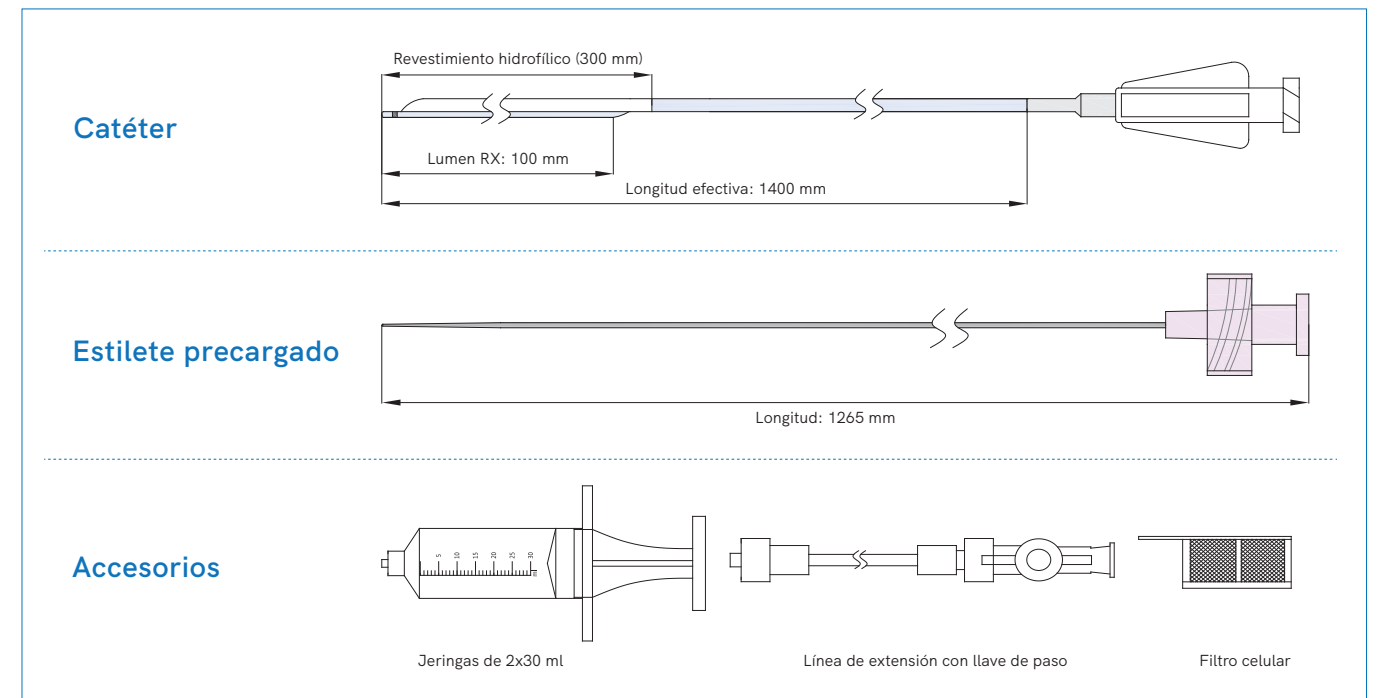

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

REF	Longitud efectiva (cm)	D.I. distal (mm)	D.I. proximal (mm)	D.E. máximo (mm)	D.I. del lumen de la guía	Longitud del lumen de la guía	Compatibilidad del catéter guía
65765501	135	1.27	1.39	1.93	0.017"	200	7F
65654402	135	0.99	1.11	1.65	0.017"	200	6F
65765504	135	1.27	1.39	1.93	0.017"	50	7F
65654405	135	0.99	1.11	1.65	0.017"	50	6F
65765529	140	1.35	1.35	1.93	0.017"	100	7F
65654430	140	1.1	1.1	1.75	0.017"	100	6F